



# Meriden Sonic+ Professional

---

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

---

SZONIKUS FOGKEFE HÁROM TISZTÍTÁSI MÓDDAL ÉS UTAZÓTÁSKÁVAL

## AZ ÚJ SZÓNÍKUS FOGKEFÉJE

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Meriden Sonic+ Professional szónikus fogkefét, ami három fogmosási móddal és USB töltővel rendelkezik. A fogkefe optimális használata érdekében kérjük, olvassa el a használati utasítást, és az alábbi irányelvek szerint járjon el.

### Tartozékok:

(a kialakítás modelltől függően változhat)

- szónikus fogkefe
- töltő
- USB kábel
- 2 fogkefefej
- utazótok
- EU hálózati tápegység
- használati utasítás, szervizelési útmutatók

## FONTOS TANÁCSOK KEZDŐKNEK, BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- A használati útmutató célja, hogy megismertesse a felhasználóval a termék különböző funkcióit. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót későbbi használatra.
- A termék nem megfelelő használata károkat okozhat. VIGYÁZAT! Személyi sérülés veszély!
- Ne nyissa fel a készüléket, és ne javítsa saját maga.
- Kérjük, hogy a terméket megfelelő óvatossággal kezelje. A termék megsérülhet ütések, ütődések által és kis magasságból történő leesés következtében is.
- Ne tárolja a készüléket nedves és rendkívül meleg helyen.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Hosszabb ideig tartó fogínyvérzés esetén forduljon fogorvosához.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség kompatibilis az elektromos hálózat feszültségével.
- Ne hagyja a töltőt konnektorba csatlakoztatva.
- A fogkefét csak rendeltetésnek megfelelően használhatja, ahogyan a használati utasításban leírva találja. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Ne próbálja meg engedély nélkül kinyitni, javítani vagy módosítani a terméket.
- Ha a fogkefe leesik, a fogkefe fejét a következő használat előtt ki kell cserélni, még akkor is, ha a sérülésnek nincsenek látható jelei.
- Ne használja a töltőállványt és a kábelt kültéren vagy hőforrások közelében.
- Ha a készülék nem működik, ne próbálja meg szétszerelni vagy kicserélni a fogkefe bármely részét, mivel ez áramütés veszélyét okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálattal.
- Tartsa a töltőt száraz és biztonságos helyen, amikor nem használja.
- Komoly fogászati beavatkozás esetén a fogkefe használata előtt forduljon fogorvosához.

- Forduljon fogorvosához, ha a fogkefe használata után erős fogínyvérzés jelentkezik, vagy ha a fogkefe használatának megkezdése után egy hétnél hosszabb ideig fennáll a fogínyvérzés.
- A Meriden Sonic Professional fogkefe megfelel az elektromágneses eszközökre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ha beültetett pacemakerrel vagy más orvosi eszközzel rendelkezik, kérjük, forduljon orvosához vagy a beültetett eszköz gyártójához.
- Ne használja a készüléket, ha a fogkefe hegye sérült, vagy ha a sörték már elhasználódtak. A sérült sörték fogmosás közben kihullhatnak. A fogkefe fejét 3 havonta cserélje ki vagy gyakrabban, ha a kopás látható jelei mutatkoznak.
- A készüléket nem használhatják gyengébb fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, és olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel az ilyen típusú berendezések használatában.
- A Meriden Sonic Professional fogkefe a fogak, a fogíny, és a nyelv tisztítására szolgál. Ne használja más célra. A Meriden Sonic+ Professional fogkefe egy személyi higiéniai eszköz, amelyet nem arra szántak, hogy több ember használjon.
- A terméket gyermekek csupán felnőttek felügyelete mellett használhatják, feltéve, hogy megértették a készülék működési elvét és a helytelen használatból eredő kockázatokat. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- A gyermekeket felügyelni kell a fogkefe használatakor, és figyelmeztetni kell őket, hogy ne babráljanak az eszközzel. A gyermekek nem játszhatnak a fogkefével.
- A műszaki változtatások és a hibák kijavításának jogát fenntartjuk.

## FONTOS TANÁCSOK AZ ELEMekkel ÉS AZOK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

**Ne dobja ki az elemeket a normál háztartási hulladékkal együtt. Használat után dobja ki az akkumulátort a megfelelő gyűjtőedénybe. Az akkumulátor hulladékkezelő helyre is visszavihető. Az akkumulátor tartósan a termékhez van rögzítve, és nem cserélhető ki. Ha az akkumulátort hosszabb ideig tárolja, javasoljuk, hogy csak a 30%-os kapacitás elérése után töltsse fel. Kerülje a napsugárzást a töltés helyén - az ideális hőmérséklet 10-20 Celsius fok.**


## A FOGKEFE BEKAPCSOLÁSA

- Helyezze a töltőt egy sík és stabil felületre. Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB töltőhöz. Helyezze a fogkefét a töltőállomásra. A töltési folyamat automatikusan elindul, és ezt az LED jelzőfény kigyulladás jele jelzi. A töltés befejeztével az LED jelzőfény kialszik.
- Helyezd a fogkefe fejét a fogkefe nyelére.
- Nedvesítse meg a fogkefe fejét vízzel, és vigyen fel rá megfelelő mennyiségű fogkrémet.
- Kapcsolja be a fogkefét a bekapcsoló gomb megnyomásával.

## A TERMÉK ADATAI



2 perces időtartam  
30 másodperces emlékeztető

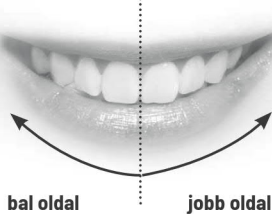

## SZÓNIKUS FOGKEFE ÜZEMMÓDOK

A multifunkcionális gombbal választhatja ki a következő funkciókat.

**Tisztítás:** napi fogmosáshoz.

**Fehérités:** finoman, de hatékonyan eltávolítja a felületi elszíneződéseket és a lepedéket. Eltávolítja a teától, vörösbortól, cigarettától és dohánytól származó foltokat egy hét használat alatt.

**Ínyápolás:** finoman masszírozza az ínyét.

A fogkefét lassan, kis mozdulatokkal kell mozgatni, és nem szabad túl erősen nyomni a fogakra. 30 másodperc után egy rövid szünet jelzi a fogmosás következő lépésére való áttérést.

## TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Kapcsolja ki a fogkefét. Minden használat után ki kell öblíteni a fogkefe markolatot és a fejet folyó víz alatt, és óvatosan szárítsa meg őket egy kendővel.
- A töltőt nedvesített kendővel óvatosan meg kell tisztítani.
- A fogkefét száraz helyen kell tartani.
- A fogkefe fejét háromhavonta vagy gyakrabban ki kell cserélni, a fogkefe állapotától és használat gyakoriságától függően.

## A GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE

- Véletlenszerű eseményekből (elektromos hiba, tűz, áradat, árvíz stb.) eredő károk.
- A készülék használata során a garanciális jogosult által okozott mechanikai károk, valamint az ezekből eredő hibák.
- A felhasználó hibájából eredő károk.
- A gyártó által nem ajánlott eszközhasználatából eredő kár, ami a gyártó általi használati utasításban nem szerepel.
- A garanciális pecsétek megsértése, vagy a szervizelésre jogosult személyeken kívül más személyek bármilyen jellegű beavatkozása,
- Szállítás és kezelés.

**A garancia nem terjed ki a termék természetes kopásnak kitett alkatrészeinek megváltozása (minőségromlás) miatti meghibásodására. A garanciális javítások nem terjednek ki a használati útmutatóban leírt készülék karbantartási és tisztítási tevékenységeire.**



## A NEM SZÜKSÉGES KÉSZÜLÉKEK ELTÁVOLÍTÁSA HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÓK ÁLTAL AZ EURÓPAI UNIÓBAN.

A terméken vagy annak csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy azt nem lehet háztartási szeméttel együtt eltávolítani. Ennek következtében Ön felelős a hulladék berendezések eltávolításáért, és köteles azt egy engedéllyel rendelkező, nem kívánt elektromos és elektronikai berendezéseket újrahasznosító létesítményhez eljuttatni. A hulladék berendezések válogatása, eltávolítása és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmének elvei szerint történjen. További információkért a használt berendezések gyűjtési pontjairól, kérjük, forduljon helyi hatóságokhoz vagy helyi háztartási hulladék-újrahasznosító pontjához.



**Ez a termék megfelel az elektromágneses kompatibilitásról és az elektromos biztonságról szóló EU irányelv követelményeinek.**

HU

### **MŰSZAKI ADATOK:**

Teljesítmény: 3W

Feszültség: DC3, 7V

Akkumulátor: Li-Ion, 700mAh

Vízhatlanság: IPX7

Rezgés/perc: Akár 42000 szónikus mozgás

Működési idő: akár 21 nap a fogkefe napi kétszeri használata esetén.





Forgalmazó: Korken Medmark Kft.  
2510 Dorog, Mátyás király u. 34.  
[www.korkenmedmark.hu](http://www.korkenmedmark.hu)  
Minden MERIDEN termékre 2 év gyártói garancia érvényes.

Meriden Sp. z o.o.  
ul. Piastów 96  
42-290 Blachownia, Poland  
[meriden@meriden.pl](mailto:meriden@meriden.pl)  
[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)  
[www.facebook.com/meridenglobal](https://www.facebook.com/meridenglobal)  
[www.instagram.com/meridenglobal](https://www.instagram.com/meridenglobal)  
Designed by Meriden in Poland